


HOSPITAL CARE

Seringue Terumo

Seringue 3 pièces

Informations sur le produit

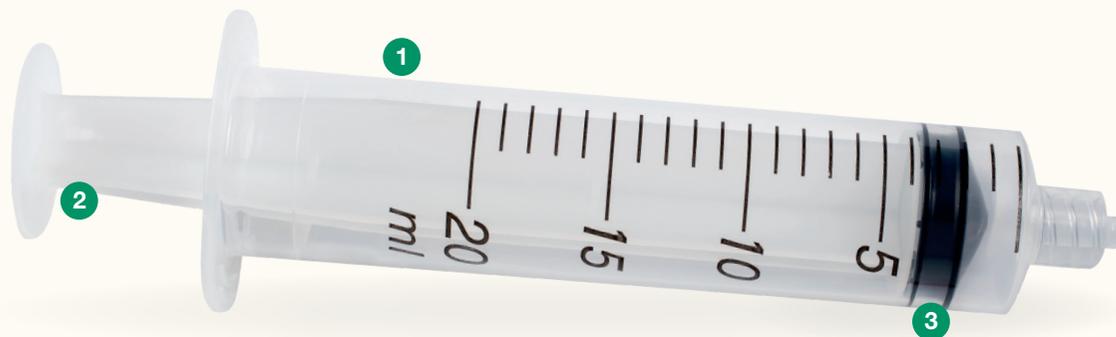

Seringues jetables
à usage unique

Chaque détail est le résultat de la longue expérience de Terumo dans ce domaine ce qui est apprécié par les utilisateurs du monde entier.

- Siliconage pour un mouvement optimal du piston
- Butée ferme et précise
- Repères gradués clairs permettant un dosage précis
- Tube transparent pour la visualisation
- Ailettes facilitant la manipulation

Description	Matériaux
1 Corps	Polypropylène
2 Piston	Polypropylène
3 Joint	Élastomère thermoplastique (pour les codes SS) Caoutchouc polyisoprène (pour les codes MDSS)
Lubrifiant	Huile de silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Stérilisation

Par faisceau d'électrons (pour les codes SS*) ou oxyde d'éthylène (pour les codes MDSS) jusqu'à un niveau d'assurance de stérilité d'au moins 10⁻⁶

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur le papier (pour les codes „MDSS“) ou embossés dans le film du blister (pour les codes „SS“).
- Ne pas stocker à des températures et à des taux d'humidité extrêmes (pour les codes „MDSS“ et „SS*“) ou entre 2°C et 30°C (pour les codes „SS+“).

¹ Du temps de qualité pour de meilleurs soins

² Du temps de qualité pour de meilleurs soins*, telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions

² Injection et accès

Informations sur le produit Seringue Terumo



Gamme de produits

Référence	Capacité		Incréments	Embout	Remplacement de
	Nominale	Graduée			
MDSS01SE	1 ml	1 ml	0.01 ml	Luer Slip centré	SS+01T1
SS*02LE1	2.5 ml	2.5 ml	0.1 ml	Luer Lock centré	-
SS*02SE1	2.5 ml	2.5 ml	0.1 ml	Luer Slip centré	-
MDSS03SE	3 ml	3 ml	0.1 ml	Luer Slip centré	SS*02SE1, SS+03S
MDSS03LE	3 ml	3 ml	0.1 ml	Luer Lock centré	SS*03L, SS+03L1
MDSS05SE	5 ml	5.5 ml	0.2 ml	Luer Slip centré	SS*05SE1, SS+05S
MDSS05LE ¹	5 ml	5.5 ml	0.2 ml	Luer Lock centré	-
SS*05LE1	5 ml	6 ml	0.2 ml	Luer Lock centré	-
SS*05SE1	5 ml	6 ml	0.2 ml	Luer Slip centré	-
MDSS10SE	10 ml	11 ml	0.2 ml	Luer Slip excentré	-
MDSS10ESE	10 ml	11 ml	0.2 ml	Luer Slip excentré	SS+10ES1
MDSS10LE ¹	10 ml	11 ml	0.2 ml	Luer Lock centré	-
SS*10LE1	10 ml	12 ml	0.2 ml	Luer Lock centré	-
MDSS20ESE	20 ml	22 ml	1 ml	Luer Slip excentré	SS+20ES1
MDSS20LE ¹	20 ml	22 ml	1 ml	Luer Lock centré	-
SS+20L1	20 ml	25 ml	1 ml	Luer Lock centré	-
SS+30ES1	30 ml	35 ml	1 ml	Luer Slip excentré	-
SS+30L1MP	30 ml	35 ml	1 ml	Luer Lock centré	-
SS+50L1	50 ml	60 ml	1 ml	Luer Lock centré	-
SS+50ES1	50 ml	60 ml	1 ml	Luer Slip excentré	-
SS+50C1	50 ml	60 ml	1 ml	Embout cathéter	-

CE
0197



STERILE EO
pour les codes
MDSS

STERILE R
pour les codes
SS

¹ Cette seringue Luer Lock ne convient pas à l'utilisation avec un pousse-seringue.

Unité individuelle : emballage thermoformé (film/film pour les codes „SS“ et film/papier pour les codes „MDSS“)

Conditionnement

Boîte unitaire	Carton de livraison		
	Quantité	Poids brut	Dimensions (L x l x H)
100	3000	12.70 kg	635 x 295 x 505 mm
100	2400	10.40 kg	397 x 581 x 444 mm
100	2400	9.30 kg	394 x 581 x 444 mm
100	1800	10.30 kg	445 x 447 x 449 mm
100	1800	11.10 kg	445 x 447 x 449 mm
100	1800	12.80 kg	656 x 419 x 426 mm
100	1800	13.20 kg	655 x 418 x 426 mm
100	1600	10.60 kg	412 x 573 x 444 mm
100	1600	10.40 kg	411 x 576 x 444 mm
100	1200	13.00 kg	569 x 473 x 459 mm
100	1200	14.20 kg	568 x 496 x 460 mm
100	1200	13.00 kg	575 x 455 x 455 mm
100	800	15.00 kg	359 x 581 x 383 mm
50	400	8.30 kg	468 x 390 x 455 mm
50	400	8.10 kg	465 x 380 x 445 mm
50	600	9.90 kg	468 x 390 x 455 mm
25	200	6.30 kg	560 x 398 x 255 mm
25	200	6.20 kg	558 x 395 x 254 mm
25	100	5.10 kg	464 x 320 x 275 mm
25	100	5.10 kg	472 x 324 x 282 mm
25	100	5.30 kg	472 x 324 x 282 mm



Statut réglementaire

Certification CE –
Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié
TÜV Rheinland 0197

Fabricant
pour les codes SS+ TERUMO (Philippines)
CORPORATION, 124 East Main Avenue,
Laguna Technopark, Binan, Philippines
pour les codes SS* TERUMO
CORPORATION, 2-44-1 Hatagaya,
Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072, Japon
pour les codes MDSS Yangzhou Medline
Industry Co., Ltd. (Chine)

Représentant CE
pour les codes SS TERUMO EUROPE S.A. –
Leuven, Belgique
pour les codes MDSS Shanghai International
Corp. GmbH (Europe) – Hambourg,
Allemagne

Distributeur
pour les codes MDSS TERUMO EUROPE
S.A., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven,
Belgique

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Date d'établissement Février 2024.

Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas réutiliser
- Éliminer les aiguilles après usage unique conformément au protocole de l'établissement afin d'éviter tout risque d'infection

Consultez toujours l'étiquette du dispositif pour un aperçu complet des avertissements, mises en garde et/ou précautions avant l'utilisation effective.

Choisissez parmi une gamme de volumes allant de 1 ml à 50 ml

Les seringues sont disponibles avec tous les types d'embouts courants.

TERUMO
TERUMO EUROPE N.V.

Votre partenaire Terumo

Terumo Corporation Terumo Europe N.V.
+81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
Bâtiment Atria – 3ème étage
1 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
France

www.terumo-europe.com

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à TERUMO CORPORATION, à ses sociétés affiliées ou à des tiers non liés. Publié par Terumo Europe S.A.

Veillez noter que certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Contactez votre représentant Terumo local.